


# Catálogo de Productos

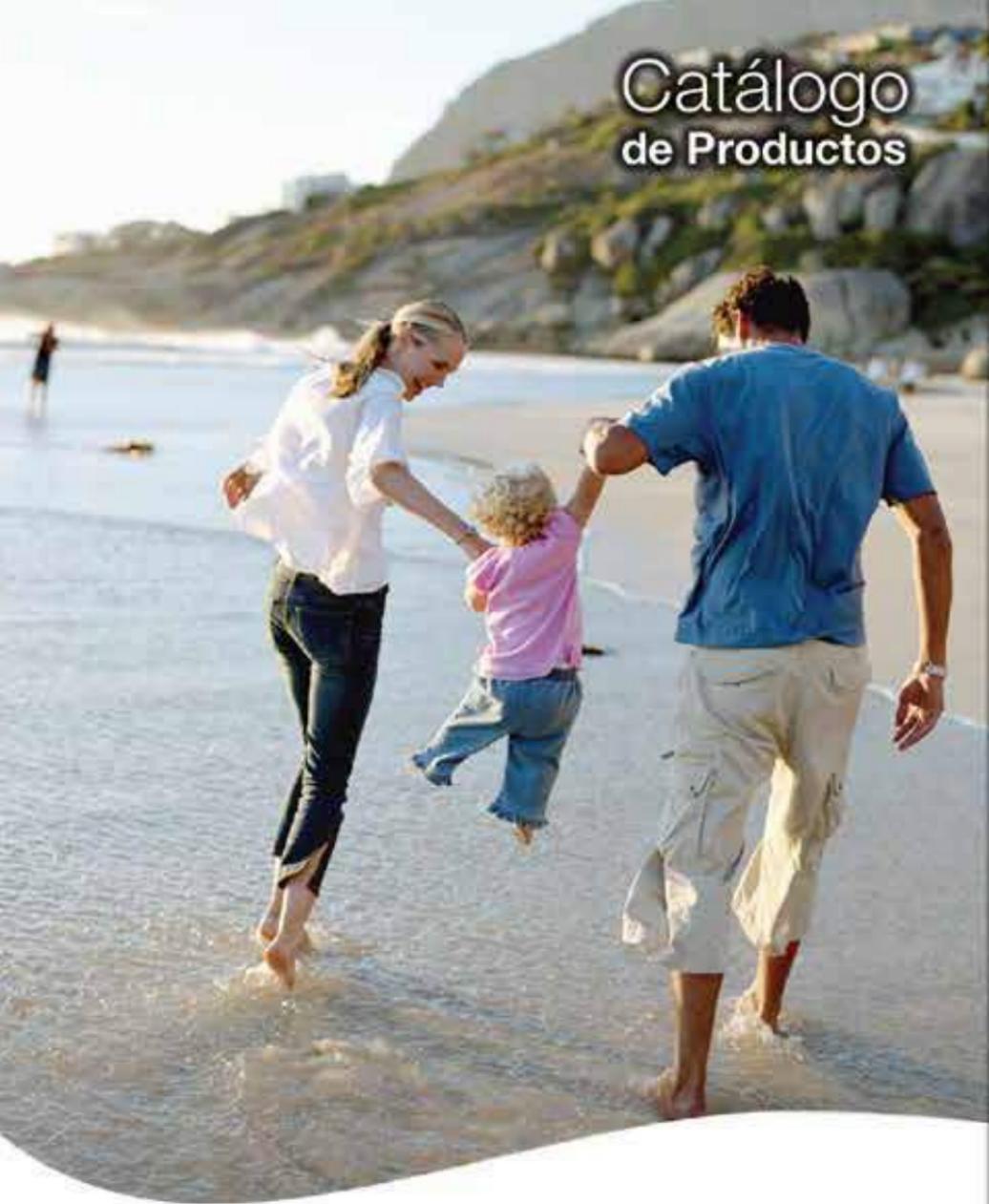

Hollister

■ Ostomía ■ Cuidado de Heridas ■ Cuidados para Incontinencia ■ Cuidados Críticos

# Indice

## OSTOMÍA

Barreras Cutáneas Hollister	07
Cierre lock'n Roll	08
Filtro para gases AF300	09
Sistemas de bolsas 1 pieza	
Línea Premier	10-11
Línea Kayara	12-13
Sistemas de bolsas 2 piezas	
Línea New Image	14-18
Línea Pouchkins (pediatría)	19-20
sistema de 1 y 2 piezas para pediatría	

## ACCESORIOS PARA OSTOMÍA ADAPT

Utilización desodorante Adapt	22
Desodorante lubricante	23
Anillos convexos de hidrocoloide	23
Anillos planos de hidrocoloide	23
Pasta Adapt	24
Pasta de Karaya	24
Polvo Adapt	24
Cinturón para bolsas de ostomía	25
Barreras de hidrocoloide en tiras	25

---

## LÍNEA DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS

Restore Hydrogel	28
Restore extra-delgado	28
Restore Plus con bordes biselados	28

Apósitos de hidrocoloides	29
Restore apósitos de alginato de calcio	29

---


## LÍNEA DE PRODUCTOS PARA INCONTINENCIA

Línea Instancat	32-33
-----------------	-------

---

## LÍNEA CUIDADO CRÍTICOS

Sujetador para tubo endotraqueal oral Anchor Fast	36
Dispositivo de fijación para tubo de drenaje horizontal	36
Dispositivo de fijación para tubo de drenaje vertical	36
Dispositivo de fijación para sondas nasogástricas	36
Colocador de drenaje de heridas	37

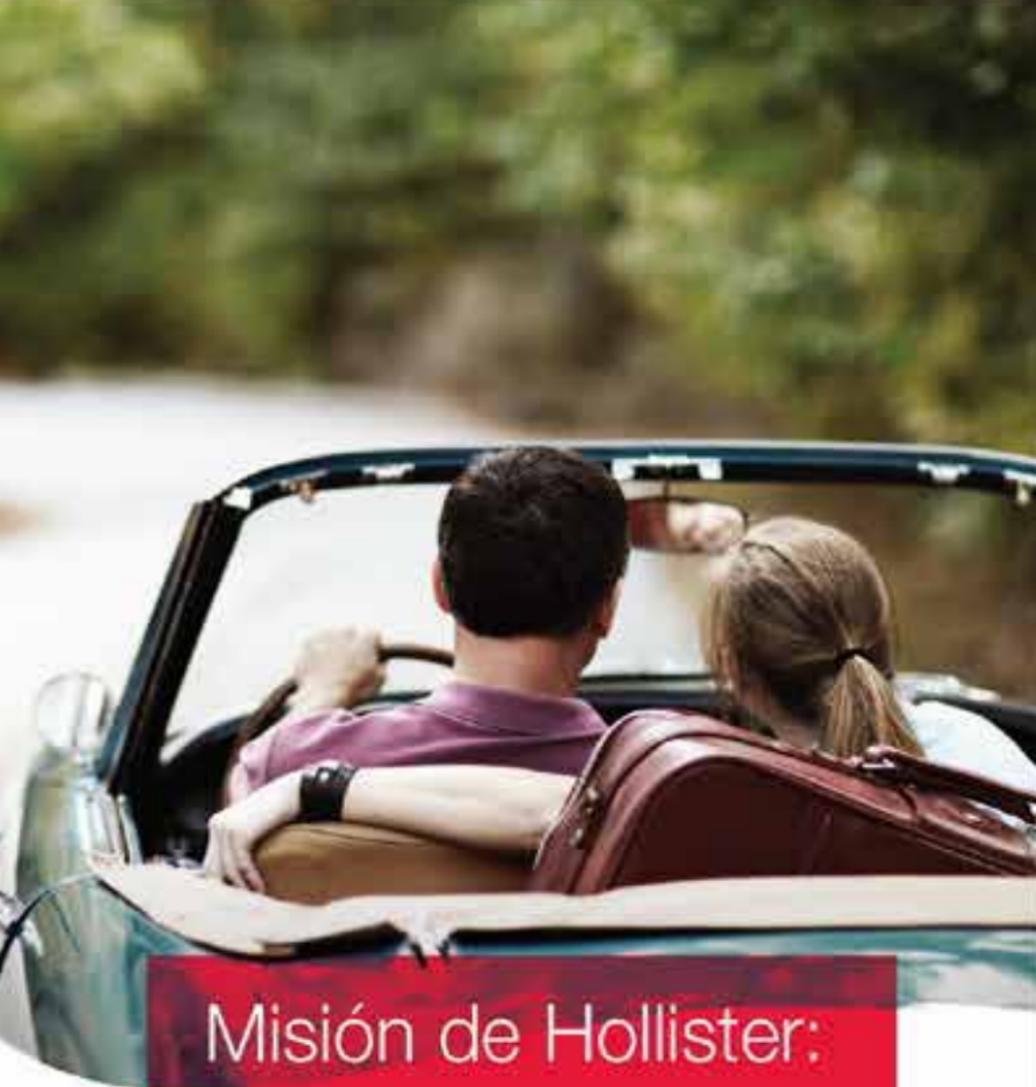

## Misión de Hollister:

Ayudar a los profesionales de la salud a ofrecer mejores productos y servicios.

Hacer la vida más digna a aquellas personas que usan nuestros productos.

Cuidamos los detalles. **Cuidamos la vida.**

1

Ostomía



Hollister Ostomía. **Los detalles importan.**

## Barreras cutáneas Hollister

- **Karaya 5** es una barrera cutánea de hidrocoloide natural de **uso estándar** ideal para piel delgada, frágil y/o sensible. También en los casos en que se produce una dermatitis o irritación.

Es fácil de retirar por ser ligeramente adhesiva y se presenta con marco adhesivo microporoso e hipoalergénico adicional al hidrocoloide que permite la transpiración y se adapta al contorno de la piel, brindando mayor seguridad y confort. Las barreras de **Karaya 5** son bacteriostáticas y levemente convexas. Diseñadas para cambios frecuentes.

- **SoftFlex** es una barrera cutánea de **uso estándar** delgada y flexible, que proporciona una adherencia suave y gentil para la piel, diseñada para **cambios frecuentes**.

Ofrece menor resistencia a la erosión sin comprometer la seguridad.


Las barreras planas presentan una cantidad de hoyuelos donde el hidrocoloide no tiene contacto con la piel, dando como resultado una mayor protección.

- **FlexWear** es una barrera cutánea de hidrocoloide de **uso estándar** que proporciona una adherencia moderada y ofrece un buen balance entre durabilidad y suavidad. Diseñadas para ser usadas más de un día.

Mantienen su forma en presencia de fluidos como orina o heces líquidas. En los productos para ostomía se presentan con marco adhesivo microporoso e hipoalergénico adicional al hidrocoloide que permite la transpiración y se adaptan al contorno de la piel brindando mayor seguridad, flexibilidad y confort.

- **Flextend** es una barrera cutánea de hidrocoloide de **uso extendido**. Es muy durable y ofrece alta resistencia a la erosión en presencia de fluidos como orina o heces líquidas.

Se hincha cuando entra en contacto con el líquido para ayudar a formar un sello entre la piel y el estoma. Ofrece una fuerte adhesión y flexibilidad. En los productos para ostomía se presentan con marco adhesivo microporoso e hipoalergénico adicional al hidrocoloide que permite la transpiración y se adaptan al contorno de la piel brindando mayor seguridad y confort.

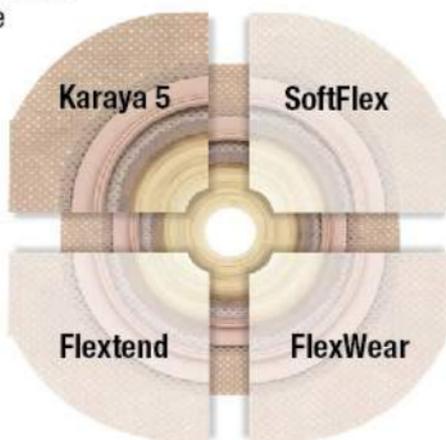

## Lock'n Roll

Las bolsas **Premier, New Image y Pediátricas** drenables poseen el sistema de cierre integrado Lock'n Roll exclusivo de Hollister. Este sistema consiste en conectores plásticos que se entrelazan entre sí logrando un cierre seguro, cómodo y fácil de usar.



**Sistema Lock'n Roll, fácil de usar, fácil de drenar, fácil de limpiar y fácil de cerrar.**

### Cierre de bolsas drenables:

**Paso 1:** Enrolle la punta de la bolsa 3 veces de abajo hacia arriba hasta que la banda de cierre quede hacia el frente.

**Paso 2:** Baje la aleta transparente superior sobre la banda.

**Paso 3:** Apriete firmemente desde el centro de la aleta hacia los extremos para cerrar.



Paso 1

Paso 2

Paso 3

*Nota: Para aquellos dispositivos que no cuentan con sistema de cierre incorporado, deberá utilizar su correspondiente Clamp.*



### Higiene de bolsas drenables.

Para higienizar una bolsa drenable siga los siguientes pasos:

- 1: Levante la aleta de cierre.
- 2: Desenrolle las 3 vueltas.
- 3: Apriete con los dedos los bordes plásticos de la boca hacia adentro. Esto permitirá drenar el contenido en el inodoro.
- 4: Para limpiar, continúe apretando la boca de la bolsa con los dedos y limpie su interior con un paño o toalla húmeda.
- 5: Por último limpie y seque el borde exterior de la bolsa y ciérrela nuevamente.



1

2

3

4

5

# Filtro para gases AF300

## Filtro AF300, última generación en filtros de carbón activado

### Mejor control del olor

AF por sus siglas en inglés "Air Flow" representan 300 mm<sup>2</sup> de recorrido que incrementan la superficie de absorción de las moléculas de olor en su salida al exterior.

### Puede bañarse / nadar y sentirse seguro

El filtro AF300 está protegido por una membrana llamada GORE® que evita la filtración de líquidos del interior o exterior de bolsa.

### Ayuda a reducir el efecto balón en las bolsas



*Flujo de aire superior*

Hollister Ostomía. **Los detalles importan.**



Línea de productos para **Ostomía**  
**Sistema**  
**de 1 pieza**

Línea de productos para **ostomía****Bolsas cerradas con barrera recortable**

- Filtro integrado AF 300
- Barrera cutánea **SoftFlex plana**
- Películas anti-olor y anti-ruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave



Largo bolsa 23 cm

Código	Código	Recortable	Caja x
	82300 Beige	15-55 mm	30 Un
82402 Transparente	82302 Beige	15-65/75 mm (oval)	30 Un

**Bolsas drenables con barrera recortable**

- Filtro integrado AF 300
- Barrera cutánea **SoftFlex plana o convexa**
- Películas anti-olor y anti-ruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave
- Sistema de cierre integrado Lock'n Roll



Largo bolsa 30 cm

Código	Código	Recortable	Caja x	Barrera
88400 Transparente	88300 Beige	15-55 mm	10 Un	Plana
88402 Transparente	88302 Beige	15-65/75 mm (oval)	10 Un	Plana
85211 Transparente	85011 Beige	15-51mm	5 Un	Convexa <sup>(1)</sup>

(1) Convexidad moderada que garantiza un manejo perfecto en el 90% de las situaciones clínicas requeridas.

**Bolsas para Urostomía con barrera recortable**

- Barrera cutánea **Flextend plana**
- Marco adhesivo microporoso hipoalergénico
- Películas anti-olor y anti-ruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave del lado de la piel
- Válvula de desagote y sistema anti-reflujo



Largo bolsa 23 cm

Código	Recortable	Caja x
8460 Transparente	15-64 mm	10 Un

## Línea de productos para **ostomía**

### Bolsas cerradas con barrera pre-cortada

- Bolsas con aro de **Karaya 5** (convexidad suave)
- Barrera pre-cortada con marco adhesivo microporoso hipoalergénico
- Presillas para cinturón
- Filtro para gases incorporado
- Construidas con películas anti-olor y anti-ruido



Código	Tamaño barrera	Precorte de	Caja x	
3323	38 mm	29 mm	30 Un	Transparente
3329	44 mm	35 mm	30 Un	Transparente
3324	51 mm	38 mm	30 Un	Transparente
3325	64 mm	51 mm	30 Un	Transparente
3326	76 mm	64 mm	30 Un	Transparente

### Bolsas drenables con barrera pre-cortada

- Bolsas con aro de **Karaya 5** (convexidad suave)
- Barrera pre-cortada con marco adhesivo microporoso hipoalergénico.
- Presillas para cinturón
- Construidas con películas anti-olor y anti-ruido.
- Incluye Clamp para cierre



Código	Tamaño barrera	Precorte de	Caja x	
3228	32 mm	22 mm	30 Un	Transparente
3223	38 mm	29 mm	30 Un	Transparente
3229	44 mm	35 mm	30 Un	Transparente
3224	51 mm	38 mm	30 Un	Transparente
3225	64 mm	51 mm	30 Un	Transparente

Línea de productos para **ostomía**

## Bolsas para urostomía con barrera pre-cortada

- Bolsas con aro de **Karaya 5** (convexidad suave)
- Barrera pre-cortada con marco adhesivo microporoso hipoalergénico
- Presillas para cinturón
- Válvula de desagote
- Sistema anti-reflujo
- Construidas con películas anti-olor y anti-ruido



Largo bolsa 23 cm

Código	Tamaño barrera	Precorte de	Caja x	
1438	32 mm	22 mm	10 Un	Transparente
1433	38 mm	29 mm	10 Un	Transparente
1434	51 mm	38 mm	10 Un	Transparente



Línea de productos para **Ostomía**  
**Sistema**  
**de 2 piezas**

# New Image

## Sistema de identificación por colores

Para ayudarlo a seleccionar los componentes del Sistema de Dos Piezas la etiqueta de cada caja de productos **New Image** está identificada con un color.

Una vez que haya elegido la barrera cutánea **New Image**, seleccione una bolsa que corresponda con el color marcado en la etiqueta de la caja.



## Barreras Cutáneas

Amplia variedad de opciones que satisfacen las necesidades individuales de cada persona ostomizada.

- Disponible en barreras planas y convexas recortables.
- Diseñado con **aro flotante** para evitar presionar la región abdominal (en especial en el período post-operatorio) al acoplar la barrera con la bolsa.
- Es de bajo perfil y altamente flexible, posee un sistema de acople que permite unir la bolsa y la barrera con una ligera presión entre ellos. Basta escuchar el "click" para que la barrera y la bolsa tengan un ensamble seguro.
- Barreras con marco adhesivo microporoso e hipoalergénico adicional al hidrocoloide que permite la transpiración.
- Flexibilidad que adapta al contorno de la piel.
- Convexidad moderada que garantiza un manejo perfecto en el 90% de las situaciones clínicas requeridas.



Hollister Ostomía. **Los detalles importan.**

## Barreras cutáneas planas recortables

- Construidas en hidrocoloide **Flextend** (uso extendido)
- Marco adhesivo microporoso hipoalergénico
- Aro flotante de bajo perfil con punto de cierre central
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



	Código	Aro de acople	Recortable hasta	Caja x	
●	14602	44mm	32mm	5 Un	Plana
●	14603	57mm	44mm	5 Un	Plana
●	14604	70mm	57mm	5 Un	Plana
●	14606	102mm	89mm	5 Un	Plana

## Barreras cutáneas convexas recortables

- Construidas en hidrocoloide **Flextend** (uso extendido)
- Marco adhesivo microporoso hipoalergénico
- Aro flotante de bajo perfil con punto de cierre central
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



	Código	Aro de acople	Recortable hasta	Caja x	
●	14802	44mm	25mm	5 Un	Convexa
●	14803	57mm	38mm	5 Un	Convexa
●	14804	70mm	51mm	5 Un	Convexa

Línea de productos para **ostomía**

## Bolsas Drenables

- Filtro integrado AF 300
- Películas anti-olor y anti-ruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave del lado de la piel
- Sistema de cierre integrado Lock'n Roll
- Presillas para cinturón
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



	Código	Código	Aro de acople	Caja x
●	18192 Transparente	18182 Beige	44mm	10 Un
●	18193 Transparente	18183 Beige	57mm	10 Un
●	18194 Transparente	18184 Beige	70mm	10 Un
●	18006 Ultra Transparente		102mm	10 Un

## Bolsas Cerradas

- Filtro integrado AF 300
- Películas anti-olor y anti-ruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave en ambas caras
- Presillas para cinturón
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



	Código	Aro de acople	Caja x
●	18372-30 Beige	44mm	30 Un
●	18373-30 Beige	57mm	30 Un
●	18374-30 Beige	70mm	30 Un

## Bolsas para **Ostomía Urinaria**

### Bolsas de Urostomía

- Películas anti-olor y anti-ruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave del lado de la piel
- Presillas para cinturón
- Válvula de desagote
- Sistema anti-reflujo
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



Código	Aro de acople	Caja x
● 18422 Ultra Transparente	44mm	10 Un
● 18423 Ultra Transparente	57mm	10 Un

# Pouchkins

Línea de productos para

*Pediatría*



# Pouchkins

Línea de productos para **Pediatría**

## Sistema de 1 pieza

### Bolsas drenables con barrera recortable

- Barrera cutánea **SoftFlex plana**
- Filtro integrado AF 300
- Películas anti-olor y anti-ruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave del lado de la piel
- Sistema de cierre integrado Lock'n Roll.



Largo bolsa: 18 cm

Código	Recortable	Caja x
--------	------------	--------

3795 Transparente	51mm	10 Un
-------------------	------	-------

## Sistema de 2 piezas

### Bolsas drenables

- Películas anti-olor y anti-ruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave del lado de la piel
- Sistema de cierre integrado Lock'n Roll
- Presillas para cinturón
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



Largo bolsa 16 cm

Código	Aro de acople	Caja x
--------	---------------	--------

3799 Transparente	44mm	10 Un
-------------------	------	-------

## Barreras cutáneas recortables

- Construidas en hidrocoloide **SoftFlex plana**
- Aro flotante de bajo perfil con punto de cierre central
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



Código	Aro de acople	Recortable hasta	Caja x
--------	---------------	------------------	--------

3761	44mm	32mm	5 Un
------	------	------	------

Hollister Ostomía. **Los detalles importan.**

A close-up photograph of a woman's hands holding a bouquet of autumn leaves. The leaves are in various stages of decay, showing vibrant colors of orange, red, and purple. The woman's face is partially visible in the background, smiling. A red rectangular box is overlaid on the center of the image, containing the text 'Línea de Accesorios'.

**Línea de  
Accesorios**

## Lubricante y Desodorante para bolsas de Ostomía

### Lubricación

- Facilita el vaciado de bolsas drenables
- Evita la estática entre las dos caras de la bolsa

### Desodorante

- Neutraliza el olor. No lo enmascara
- No contiene perfume

### Prolonga la vida útil del filtro

### No mancha la ropa

### Fácil de usar, en dos sencillos pasos



Vierta el contenido del sobre o agregue entre 5 y 8 ml aproximadamente de **Adapt Lubricante Desodorante** dentro de la bolsa.

Frote las paredes de la bolsa para que el líquido se esparza en su interior en forma pareja.



### Presentaciones:

**Sachet de 8 ml** desechable con pico pre-cortado que facilita su aplicación en cualquier lugar

**Botella x 236 ml** con práctico pico vertedor



En caso de utilizar bolsas drenables, repita el procedimiento cada vez que vacíe su bolsa.

**Precaución: No aplicar Lubricante y Desodorante Adapt sobre la barrera cutánea ya que reduce su adherencia.**

Línea de accesorios para **ostomía**

## Adapt lubricante desodorante para bolsas de ostomía

- Gel fluido, incoloro e inodoro para lubricación y eliminación de los olores
- Neutraliza el olor. No lo enmascara
- No contiene perfume
- Prolonga la vida útil del filtro



Código	Presentación	Caja x
--------	--------------	--------

78500	Frasco x 236 ml	1 Un
78501	Sachet x 8 ml	50 Un

## Adapt anillos convexos de hidrocoloide

Para uso con dispositivos de 1 ó 2 piezas para ostomía. Anillos **convexos** de hidrocoloide **Flextend** (uso extendido), no estéril. Flexibles, pueden ser moldeados y/o cortados. Favorecen el ajuste perfecto del dispositivo de ostomía indicado.



Código	Medida	Caja x
--------	--------	--------

79520	20 mm	10 Un
79530	30 mm	10 Un
79540	40 mm	10 Un

## Adapt anillos planos de hidrocoloide

Para uso con dispositivos de 1 ó 2 piezas para ostomía. Anillos **planos** de hidrocoloide **Flextend M**, no estéril. Flexibles, pueden ser moldeados y/o cortados. Favorecen el ajuste perfecto del dispositivo de ostomía indicado.



Código	Medida	Caja x
--------	--------	--------

7805	48 mm	10 Un
7806	98 mm	10 Un

# Accesorios

Línea de accesorios para **ostomía**

## Pasta Adapt

Barrera de resina sintética protectora de la piel en pasta. Compuesta por hidrocoloides. Acondicionada en tubos plásticos para facilitar la aplicación.

Código	Presentación	Caja x
79300	Tubo x 57 gr	1 Un



## Pasta de Karaya

Barrera de resina de **Karaya 5** protectora de la piel en pasta. Acondicionada en tubos plásticos para facilitar la aplicación.

Código	Presentación	Caja x
7910	Tubo x 128 gr	1 Un



## Polvo Adapt

Hidrocoloide en polvo microgranulado protector de la piel. Presentación en frasco plástico transparente que permite visualizar el producto.

Código	Contenido	Caja x
7906	28gr	1 Un



# Accesorios

Línea de accesorios para **ostomía**

## Cinturón Adapt para bolsa de ostomía

Cinturones ajustables para las bolsas de ostomía.

Código	Tamaño	Caja x
7300 Beige	Medio (66-109 cm)	1 Un
7299 Beige	Grande (74-124 cm)	1 Un



## Adapt barrera Flextend en tiras

Puede ser cortado, doblado y apilado en conjunto para mejorar el ajuste de la barrera a la piel. Puede ser estirado y moldeado para crear formas personalizadas. Se adapta a los pliegues irregulares de la piel.

Código	Tamaño	Caja x
79400	13 cm	10 Tiras



## Pinza para bolsas drenables

Construídas en plástico resistente y flexible. Capa antirruído.

Código	Caja x
8770 beige	20 Un



Hollister Ostomía. **Los detalles importan.**



**Línea  
Cuidado de  
Heridas**

# 2

## Cuidado de heridas

## Línea cuidado de heridas

### Restore Hydrogel (no estéril)

- **Hydrogel** es un gel suave, amorfo, claro y viscoso que permanece en la herida manteniendo un ambiente húmedo
- Promueve la granulación y el desbridamiento autolítico
- Contiene Ácido Hialurónico
- Indicado para el desbridamiento de tejido necrótico y/o desvitalizado en heridas superficiales o profundas secas
- No utilizar en heridas de alto nivel de exudado

Código	Contenido	Caja x
9974	89 ml	12 Un



NIVEL DE EXUDADO



SECO

### Apósito de Hidrocoloide extra delgado (estéril)

- Apósito semi-oclusivo con capa exterior flexible
- Mantiene un ambiente húmedo en la herida
- Protege la piel de las lesiones por fricción
- Incluye regla de acetato para medir la herida
- Indicado para heridas superficiales con exudado leve

Código	Tamaño	Caja x
9921	10 x 10 cm	5 Un
9925	20 x 20 cm	3 Un



NIVEL DE EXUDADO



LEVE

### Restore Plus con bordes biselados (estéril)

- Apósito de **Hidrocoloide** semi-oclusivo con capa exterior flexible
- Mantiene un ambiente húmedo en la herida
- Facilita la adaptación a los contornos anatómicos
- **Diseño especial para la región sacro coccígea**
- Incluye regla de acetato para medir la herida
- Indicado para heridas de espesor parcial a profundo con exudado moderado

Código	Tamaño	Caja x
9956	10 x 10 cm	5 Un
9958	20 x 20 cm	3 Un
9965	171 cm <sup>2</sup> (sacro)	5 Un



NIVEL DE EXUDADO



MODERADO

## Flexibilidad y Seguridad

### Restore apósitos Hidrocoloide (estéril)

- Apósito oclusivo de **hidrocoloide** flexible indicado para la prevención de úlceras por presión
- Para áreas de baja fricción con exudado moderado
- Incluye regla de acetato para medir la herida

Código	Tamaño	Caja x
9930	10 x 10 cm (dorso espuma)	5 Un
9936	20 x 20 cm (CX)	3 Un



NIVEL DE EXUDADO



MODERADO

### Restore CalciCare (estéril)

- Apósitos de **alginato de calcio**
- Altamente absorbentes
- Forma y mantiene una interfase húmeda en la herida. Crea un gel protector cuando entra en contacto con el exudado
- Permanece íntegro y puede ser retirado en una sola pieza
- Promueve el desbridamiento autolítico, facilitando la cicatrización de la herida
- Indicado para heridas **infectadas**, profundas, de alto exudado y/o tunelizadas.
- No utilizar en heridas secas o de bajo exudado

Código	Tamaño	Caja x
9937	10 x 10	10 Un
9939	10 x 20	5 Un
9940	Mecha de 30,5 cm	5 Un



NIVEL DE EXUDADO



ALTO



**Línea  
cuidado para  
continencia**

# Cuidado para continencia



Hollister

## Sonda Intermitente **Estéril**

### Sonda prelubricada lista para su uso



**Punta Nelaton ahusada:** Facilita la inserción de la sonda por la uretra. Incluso ante estrechamientos o irregularidades uretrales.

**Orificios de drenaje:** Biselados y termo pulidos para evitar daños de la mucosa uretral.

**Introduccion moldeado:** Permite una fácil sujeción de la sonda, evitando todo contacto durante su inserción. Ayuda a dirigir el sondaje, favoreciendo la comodidad y distribuyendo el gel lubricante de forma uniforme.



**Gel lubricante:** Viscoso, transparente y soluble en agua, gracias a su distribución uniforme y por su composición específica, facilita la inserción de la sonda con la máxima suavidad, evitando traumatismo de epitelio uretral.

**Cuerpo de la sonda:** De PVC siliconado, favorece la suavidad de inserción.

**Funda de extensión:** Las muescas pre cortadas facilitan la apertura del envase. Incluso en usuarios con destreza manual reducida. Contribuye a la técnica aséptica o técnica sin tocar, para una máxima higiene, al proteger la sonda de cualquier contacto directo durante el sondaje.

**Conector:** Para el drenaje de la orina a una bolsa de orina, favoreciendo la independencia y la calidad de vida del usuario.



#### La **SEGURIDAD** de InstantCath: *(Inserción sin tocar)*

Gracias a su funda de extensión, que previene el contacto directo con la sonda se minimiza la contaminación externa. De esa forma se reduce el riesgo de infecciones de tracto urinario.

#### La **CONVENIENCIA** de InstantCath: *(Sonda lista para usar)*

Prelubricada con gel soluble en agua, que no requiere de ninguna preparación y puede ser utilizada en cualquier lugar y cualquier momento.

Para cateterismo **intermitente**


## Composición cualitativa

- Cuerpo de la sonda compuesto de PVC (Cloruro de Polivinilo) con recubrimiento de silicona (D.C. 360).
- Introdutor moldeado formado por un copolímero de estirobutadieno y resina k de color azul translúcido.
- Gel lubricante compuesto por Glicopropileno y Gliceril-pollmetacrilato, viscoso, transparente, soluble en agua y con un ph entre 5 y 6.
- Esterilizado por radiación Gamma.



## Referencias disponibles

	Medida	Longitud	Para	Código Color	Referencia
<b>Masculina</b>					
	10 Ch	40 cm	Nelaton	●	9670
	12 Ch	40 cm	Nelaton	○	9671
	14 Ch	40 cm	Nelaton	●	9672
	16 Ch	40 cm	Nelaton	●	9673
<b>Femenina</b>					
	10 Ch	20 cm	Nelaton	●	9674
	12 Ch	20 cm	Nelaton	○	9675
	14 Ch	20 cm	Nelaton	●	9676
<b>Pediátrica</b>					
	6 Ch	40 cm	Nelaton	●	9677
	8 Ch	20 cm	Nelaton	●	9678

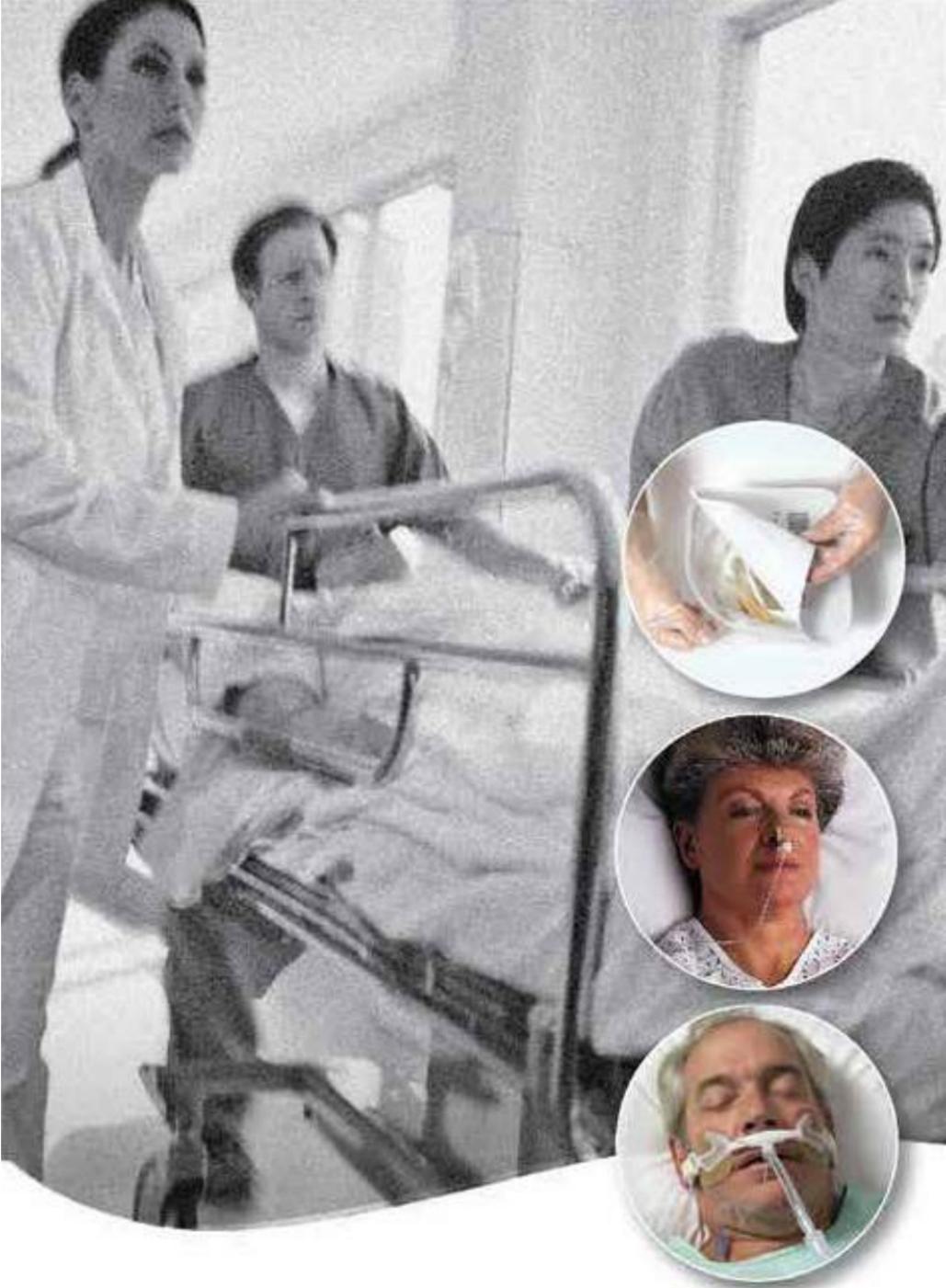

# 4

# Cuidados Críticos

## Sujetador para tubo endotraqueal oral Anchor Fast

- Mantiene fijos los tubos endotraqueales orales (5-10 mm)
- El adhesivo hidrocoloide **Flexend** se adhiere a las mejillas, eliminando el uso de cinta adhesiva y su recambio frecuente
- Su pinza movable permite reubicar y sostener los tubos de forma segura
- Simplifica el acceso para el cuidado oral
- Banda de cuello acolchada, ajustable y fácil de asegurar
- Empacado individualmente.
- Libre de látex



Con protector para el tubo endotraqueal

Código	medidas de tubos	Caja x
9799	5-10 mm	12 Un
9800	5-10 mm	12 Un

## Dispositivo de fijación para tubo de drenaje horizontal (HTAD)

- Mantiene los tubos de drenaje (5-40 Fr) en paralelo a la piel del paciente
- Asegura el sitio de salida de los tubos tanto proximal como distalmente
- Impide la migración del tubo y protege la piel alrededor del sitio de salida
- Adhesivo Hidrocoloide **FlexWear**
- Estéril y libre de látex



Código	medidas de tubos	Caja x
9781	5 - 40 Fr	5 Un

## Dispositivo de fijación para sondas nasogástricas

- Mantiene fijas las sondas de alimentación/succión
- Adhesivo hidrocoloide **FlexWear** en forma de mariposa que se ajusta a la nariz del paciente.
- Pieza giratoria única que elimina la presión de los orificios nasales.
- Libre de látex



Código	medidas de tubos	Caja x	
9786	5 - 18 Fr	20 Un	(alimentación)
9785	12 - 18 Fr	20 Un	(succión)

## Colector de drenaje de Heridas

- Indicado para drenaje de heridas, fístulas o drenaje de tubos.
- Barrera cutánea de hidrocóloide **FlexWare** (Standard Ware)
- No estéril
- Películas anti-olor
- Tapa de acceso que permite acceder a la herida y volver a cerrar
- Válvula de desagote



Código	Descripción	Caja x
9773	Chico (Heridas hasta 7,6 cm)	10 Un
9776	Mediano (Heridas hasta 9,5 cm)	10 Un
9778	Grande (Heridas de hasta 10 x 20 cm)	3 Un



Hollister y su logotipo, Hollister, Premier, Compact, Karaya, New Image, Tandem, Pouchkins, Flexextend, FlexWare, SoftFlex, Lock'n Roll, AF300, ComfortWear, Restore, Adapt, Anchor Fast e InstantCath son marcas registradas de Hollister Incorporated, Libertyville Illinois USA

"Hollister Ostomía. Los detalles importan" y "Cuidamos los detalles. Cuidamos la vida" son marcas de servicio de Hollister incorporated  
© 2015 Hollister Incorporated.

Ultima actualización Febrero 2015



Cuidamos los detalles. **Cuidamos la vida.**

Cuidamos los detalles. **Cuidamos la vida.**

**Hollister Latin America Inc.  
Sucursal Argentina**

R. Peña 694 - 8° Piso Of. "D"  
C1020ADN

Buenos Aires - Argentina  
Tel: 4373-0500  
Fax: 4373-5200

Llame gratis al

**0800-222-4655**



**Hollister**